

Die Nadel
der Experten!

NEU

MYOLINE
xpert premium

VERBESSERTER SCHLIFF
für schmerzfreien Einstich

NEUE OBERFLÄCHENVEREDELUNG
für bessere Gleiteigenschaft der Nadel

ANSCHLUSSKABEL NOCH FLEXIBLER (NADELHALTER)
für bessere Handhabung

VERBESSERTER NADELANSCHLUSS (KONTAKT)
für artefaktfreie Messungen

BESSERE SIGNALQUALITÄT
für hohe Kundenzufriedenheit

MYOLINE XP - Einmal Nadelelektroden
VE: 25 St.

Farbe:	Länge:	Durchmesser:	Artikelnr.
weiß	20mm	0,35mm	10009079P
violett	25mm	0,30mm	10009080P
rot	30mm	0,35mm	10009081P
grau	40mm	0,35mm	10009083P
grün	50mm	0,35mm	10009085P
orange	30mm	0,45mm	10009082P
schwarz	40mm	0,45mm	10009087P
gelb	50mm	0,45mm	10009089P
blau	60mm	0,50mm	10009091P
braun	70mm	0,60mm	10009093P

ABRUF AUFTRAG

**Nutzen Sie die Möglichkeit
eines Abrufs!**



**Nennen Sie uns einfach Ihren
voraussichtlichen Jahresbedarf
des gewünschten Produkts.**

**Wir erstellen Ihnen ein
unverbindliches Angebot.**

TESTEN ?

**Sie möchten ein Produkt
gerne vorab testen?**

Rufen Sie uns an!

EMG ZUBEHÖR

kompatibel mit allen gängigen EMG- / EEG-Geräten



GVB-gelIMED E. Kfm.

Tel.: 0 45 51 - 95 67 30

Fax: 0 45 51 - 95 67 33

info@gvb-gelimed.de



www.gvb-gelimed.de



Ihr Partner für
medizinisches Zubehör

EMG ELEKTRODEN

Oberflächen Stimulationselektrode

Bipolare Oberflächenstimulationselektrode mit abnehmbarem Kunststoffhalter. Jede Elektrode verfügt über zwei 7mm Stimulationspunkte aus Filz und kann durch ein Velcroband fixiert werden. Das Anschlusskabel hat eine Kabellänge von 150cm sowie einen 5-pol. 270° DIN Anschlussstecker.

Stimulationselektrode mit 150cm Anschlusskabel

und 5 pol. DIN Stecker 270° und 1,5mm DIN Stecker

Ersatzfilze, rund 7mm (10 St.)

Geschirmte Stimulationselektroden

Geschirmte Stimulationselektroden mit ergonomischen Haltegriff zur leichteren Handhabung. Die kleine Elektrode verfügt über zwei 3mm Stimulationspunkte im Abstand von 10mm, die große Elektrode über 6mm Stimulationspunkte im Abstand von 24mm. Beide Elektroden können zusätzlich mit einem Velcroband fixiert werden.

Kleine Elektrode mit 150cm Kabel und 5 pol DIN Stecker 270° und 1,5mm DIN Stecker
Stimulationsfilze, rund 3mm (10 St.)
Stimulationskugeln 3mm (1 Paar)

Kleine Elektrode mit 150cm Kabel und 5 pol DIN Stecker 270° und 1,5mm DIN Stecker
Stimulationsfilze, rund 6mm (10 St.)
Stimulationskugeln 6mm (1 Paar)

Geschirmte Balken Stimulations-, Ableitelektroden

Diese geschirmten Balken Stimulations-, Ableitelektroden mit zwei 20mm x 7mm Filzeinsätzen sind neben der Stimulation auch zur Ableitung verwendbar. Der Abstand der Stimulationspunkte zueinander beträgt wahlweise 20mm oder 40mm. Das Anschlusskabel hat eine Kabellänge von 150cm und kann mit unterschiedlichen Anschlusssteckern versehen werden. In der Grundausstattung sind neben der Elektrode auch 2 Velcrobänder in den Längen 40 und 100cm enthalten.



Große Balkenelektrode 40mm
5 pol DIN Stecker 270°
1,5mm DIN Stecker



Kleine Balkenelektrode 20mm
5 pol DIN Stecker 270°
1,5mm DIN Stecker

EMG ELEKTRODEN

Finger- / Zehen- Stimulations- / Ableitelektroden (ohne Gel verwendbar) mit geschirmten Anschlusskabel

100cm Kabel mit 1,5mm DIN Stecker
150cm Kabel mit 1,5mm DIN Stecker
150cm Kabel mit 5-pol. 270° Stecker
100cm Kabel mit 5-pol. 270° Stecker





Elektroden mit normalen Schlaufen aus rostfreiem Stahl, mit geschirmten Anschlusskabel

100cm Kabel mit 1,5mm DIN Stecker
150cm Kabel mit 1,5mm DIN Stecker
150cm Kabel mit 5-pol. 270° Stecker
100cm Kabel mit 5-pol. 270° Stecker



Oberflächen Disc-Elektroden
10mm Disc-Elektroden aus rostfreiem Stahl, 1 Paar verdrillte, rote und schwarze Kabel, 100cm Länge mit Steckern nach Wahl.

mit 5pol 270° DIN Stecker (geschirmtes Kabel)
mit 1,5mm DIN Stecker

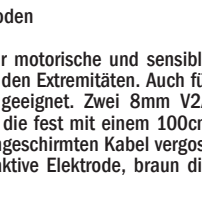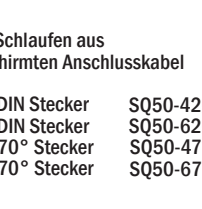

PASTEN & GELE


Die neurodiagnostische Kontaktpaste, die nicht eintrocknet. Kein Klumpen, kein 2. Auftragen erforderlich, abwaschbar, leicht zu reinigen, keine Rückstände.

VE: 3 St. 115g Dose Ten-20-SET
115g Tube Ten-20-T-SET
230g Dose Ten-20-8-SET



Modernes Hautvorbereitungsgel (empfohlen für empfindliche Haut). Keine Hautirritationen, angenehm für den Patienten.

VE: 3 St. Inhalt: 115g NUPREP-SET

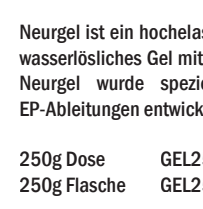


Neurgel ist ein hochelastisches und hochleitendes, wasserlösliches Gel mit einem PH-Wert von 6 bis 7. Neurgel wurde speziell für EEG-, EMG- und EP-Ableitungen entwickelt.

250g Dose GEL250V
250g Flasche GEL250F



Eine Vorbereitungspaste, speziell entwickelt um den Hautübergangswiderstand zu reduzieren. Zur Vorbereitung und für den Einsatz bei EEG - EP - EMG - EKG

Inhalt: 160ml EVERY

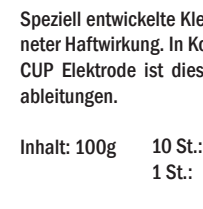

Speziell entwickelte Klebeleitpaste mit ausgezeichneter Haftwirkung. In Kombination mit unserer Gold CUP Elektrode ist diese Paste ideal für Langzeitableitungen.

Inhalt: 100g 10 St.: SEC-2
1 St.: EC-2

