


Bonnets pour système EEG

- ME- MultiCap "Base"
avec supports d'électrode
colorés en plastique durci.
- MW- ... MultiCap "Soft"
avec supports d'électrode en
silicone transparent souple.
- MC- ... MultiCap "Cup"
pour une utilisation avec les
électrodes à ventouse
GVB-geliMED 10 mm.



Accessoires des bonnets

- ME-17-AGCL-26 Électrode MCS avec câble de
(pour MC-"Base") 100cm, connecteur DIN 1,5mm.
- MW-17-Z-26 Électrode Soft avec câble de
150cm, connecteur DIN 1,5mm.
- ME-20 10 supports d'électrodes "Base"
- MWE-20 10 supports d'électrodes "Soft"
- MCE-20 10 supports d'électrodes "Cup"
- ME-F-SET 23 marqueurs de position "SET"
- ME-23-L Mentonnière pour adultes
- ME-23-S Mentonnière pour enfants/
nourrissons
- ME-3-L Sangle de poitrine pour adultes
- ME-3-S Sangle de poitrine pour enfants/
nourrissons
- ME-13 Fermeture Velcro pour fils
d'électrodes.
- OHR-EM-26 Jeu incluant 1 paire de clips
d'oreille et 2 électrodes
simples.
- OHR-EM-H 1 paire de clips d'oreille,
électrodes non comprises.
- EEG-BOX-37 Mini-tête pour EEG avec
40 connecteurs

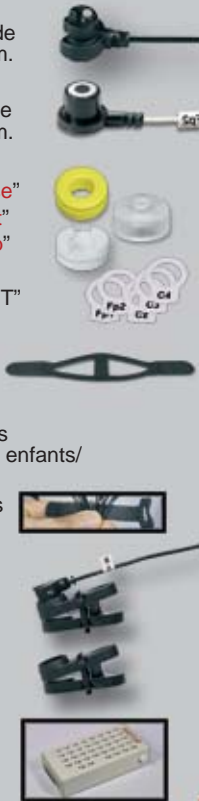

Application



Préparation

Les électrodes des bonnets MultiCap doivent être positionnées au moyen d'un gel abrasif de la même manière que pour les bonnets et les électrodes

Obstacles

La conception conviviale du bonnet permet de préparer facilement les électrodes, et ce même lorsque le bonnet est déjà en place.

Électrodes

Des électrodes « Base », « Soft » et « Cup » standard de qualité supérieure peuvent être utilisées avec tous les bonnets MultiCap (Base, Soft et Cup).

Câblage

Les électrodes se fixent aisément dans leur support par une simple petite pression du doigt. Des marqueurs de position permettent de connecter rapidement les électrodes à la boîte-tête.

Contact optimal

Tous les types d'électrode offrent un accès optimal (orifice ou encoche) pour le remplissage des électrodes avec du gel de contact au moyen d'une aiguille émoussée. La propreté de l'application est ainsi garantie en vue de l'enregistrement.

Une technologie améliorée et une conception conviviale

NOUVEAU

NOUVEAU

MULTI CAP

Une technologie améliorée et
une conception conviviale



MultiCap "Base"

MultiCap "Soft"

MultiCap "Cup"

Bonnets pour système EEG avec électrodes pour
un positionnement en toute liberté

Pour de plus amples informations sur les électrodes ou les accessoires supplémentaires, nous contacter au +49 (0) 4551 - 95 67 30 ou à l'adresse info@gvb-gelimed.de

L'équipe GVB-gelimed

GVB-geliMED E. Kfm.

Tel.: +49 (0) 45 51 - 95 67 30
Fax: +49 (0) 45 51 - 95 67 33
info@gvb-gelimed.de



www.gvb-gelimed.com



Bonnets pour système et accessoires

MULTI CAPBASE™

Bonnet néoprène pour EEG

disponible dans les tailles suivantes :

XL	60 - 64cm	Adultes
L	54 - 60cm	Femmes/Adolescents
M	48 - 54cm	Adolescents
S	42 - 48cm	Enfants
XS	36 - 42cm	Nourrissons
1	30 - 36cm	Prématurés 1
2	26 - 30cm	Prématurés 2
3	22 - 26cm	Prématurés 3

Électrodes

Les électrodes en Ag/AgCl fritté du bonnet MultiCap "Base" garantissent une polarisation minimale et des résultats cohérents lors des mesures longue durée. La petite indentation permet de remplir facilement les électrodes avec du gel. Connexion : connecteur DIN 1,5mm

Supports d'électrodes

Les supports d'électrodes du bonnet MultiCap "Base" sont en plastique durci, ce qui leur garantit une durée de vie longue. Il suffit de les détacher pour les remplacer. Tous les supports d'électrodes sont dotés de marqueurs de position.

Application :
mise en place de l'électrode dans le corps d'électrode.

Électrodes supplémentaires

Outre les électrodes standard du bonnet MultiCap "Base", des clips d'oreille sont également disponibles et peuvent être assemblés avec les mêmes électrodes que le bonnet.

MULTI CAPSOFT™

Bonnet néoprène pour EEG

disponible dans les tailles suivantes :

XL	60 - 64cm	Adultes
L	54 - 60cm	Femmes/Adolescents
M	48 - 54cm	Adolescents
S	42 - 48cm	Enfants
XS	36 - 42cm	Nourrissons
1	30 - 36cm	Prématurés 1
2	26 - 30cm	Prématurés 2
3	22 - 26cm	Prématurés 3

Électrodes et connecteurs

Les électrodes du bonnet MultiCap "Soft" sont disponibles en Ag/AgCl ou en étain fritté.

Les électrodes sont connectées à la boîte têtère au moyen d'un connecteur à 25 broches. Les électrodes supplémentaires sont équipées d'un connecteur DIN 1,5mm.

Support d'électrodes

Les supports d'électrodes pour le bonnet MultiCap "Soft" sont en silicone souple pour un confort accru. Les supports d'électrodes peuvent être remplacés facilement. Tous les supports d'électrodes sont dotés de marqueurs de position.

Application :
mise en place de l'électrode dans son support d'électrode

Électrodes supplémentaires

Nous recommandons nos électrodes oreille en Ag/AgCl ou en étain comme électrodes supplémentaires. (Remarque: Toutes les électrodes (électrodes sur le bonnet et clip d'oreille) doivent être fabriquées dans le même matériau.)

MULTI CAPCUP™

Bonnet néoprène pour EEG

disponible dans les tailles suivantes :

XL	60 - 64cm	Adultes
L	54 - 60cm	Femmes/Adolescents
M	48 - 54cm	Adolescents
S	42 - 48cm	Enfants
XS	36 - 42cm	Nourrissons
1	30 - 36cm	Prématurés 1
2	26 - 30cm	Prématurés 2
3	22 - 26cm	Prématurés 3

Électrodes

Toutes les électrodes cupules de la marque GVBGelimed de 10mm de diamètre peuvent être utilisées avec ce type de bonnet. Détachables, les électrodes peuvent aussi servir pour des enregistrements sans bonnet. Les électrodes cupules sont munies d'un connecteur DIN 1.5mm.

Support d'électrodes

Les supports d'électrodes pour le bonnet MultiCap "Cup" sont en plastique. Ils sont équipés de raccords à vis et sont faciles à remplacer. Une patte de fixation en plastique permet de placer les électrodes cupules dans le support d'électrodes. Tous les supports d'électrodes sont dotés d'un repère de position.

Application :
mise en place de l'électrode dans son support d'électrode.

Électrodes supplémentaires

Nous recommandons nos électrodes oreille en Ag/AgCl ou en étain comme électrodes supplémentaires. (Remarque: toutes les électrodes (électrodes cupules sur le bonnet et clip d'oreille) doivent être fabriquées dans le même matériau.)

Pour démarrer!

Système MultiCap "Base" complet :

3 bonnets MultiCap, diverses tailles disponibles	25x Électrodes "MCS" en Ag/AgCl fritté avec connecteur DIN 1,5mm
Tous les bonnets sont équipés de supports d'électrodes et de mentonnières	2x Électrodes d'oreille en Ag/AgCl fritté
	1x Kit d'aiguilles pour le remplissage des électrodes avec du gel
	1x Gel conducteur salin, bouteille de 250g
	1x Pâte de préparation de la peau, bouteille de 160g
	1x Ruban de mesure du périmètre crânien
	1x Embouts de nettoyage (paquet de 100)

Pour démarrer!

Système de bonnet MultiCap "Soft" complet :

3 bonnets MultiCap, diverses tailles disponibles	22x Électrodes pour le bonnet MultiCap "Soft" (21+1) en étain avec multi-connecteur à 25 broches.
Tous les bonnets sont équipés de supports d'électrodes et de mentonnières	2x Électrodes d'oreille en étain
	1x Kit d'aiguilles pour le remplissage des électrodes avec du gel
	1x Gel conducteur salin, bouteille de 250g
	1x Pâte de préparation de la peau, bouteille de 160g
	1x Ruban de mesure du périmètre crânien
1 DVD d'instructions à l'usage de l'utilisateur	1x Embouts de nettoyage (paquet de 100)

Pour démarrer!

Système de bonnet MultiCap "Cup" complet :

3 bonnets MultiCap, diverses tailles disponibles	25x Électrodes cupules (en or ou en Ag/AgCl) avec connecteur DIN 1,5mm
Tous les bonnets sont équipés de supports d'électrodes et de mentonnières.	2x Électrodes d'oreille (en or ou en Ag/AgCl)
	1x Kit d'aiguilles pour le remplissage des électrodes avec du gel
	1x Gel conducteur salin, bouteille de 250g
	1x Pâte de préparation de la peau, bouteille de 160g
	1x Ruban de mesure de la tête
1x DVD sur les électrodes à ventouse	1x Embouts de nettoyage (paquet de 100)